

神经递质分析

色谱柱: Exsil™ Plus EPS C18, 1.5μm, 2.0 x 100mm

规格: 100 x 2.0 mm ID

货号: 6136850.s1002

洗脱方式: Gradient

流动相A: 0.1%FA in H₂O

流动相B: 0.1%FA in ACN

等度条件:


Time (mins)	0.0	3.0
%B	0	90

流速: 0.4mL/min

柱温: 50°C

进样体积: 5uL

检测器: MS/MS

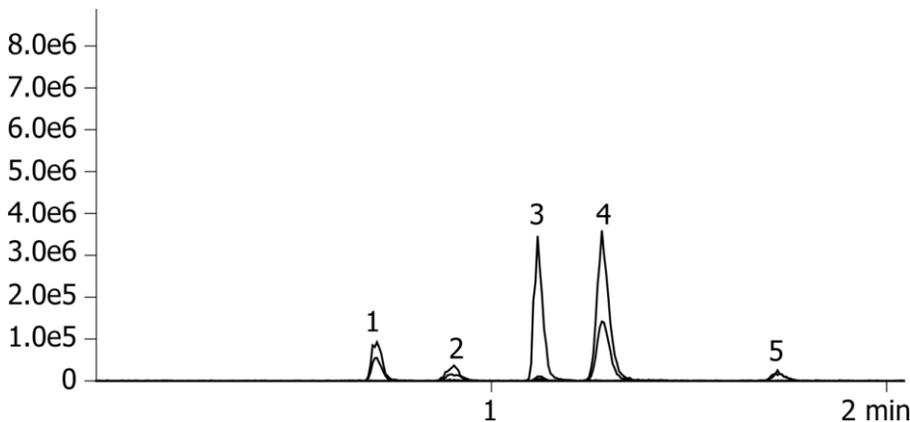

化合物名称:

1. 去甲肾上腺素
2. 肾上腺素
3. 去甲变肾上腺素
4. 多巴胺
5. 变肾上腺素
6. 3-甲氧酪胺
7. 香草扁桃酸
8. 5-羟吲哚乙酸
9. 高香草酸

